


血液总RNA提取试剂盒 (TR121)

- **出众的得率：**可提取到总RNA（包括小/微RNA）而不损失样本。
- **保护性：**配合试剂盒提供的保护剂可常温下保存血液样本最长可达7天。
- **高质量：**提取好的RNA可应用于以下实验，包括二代测序、RT-PCR等。


【测试结果】

1、从人全血中提取高质量的RNA

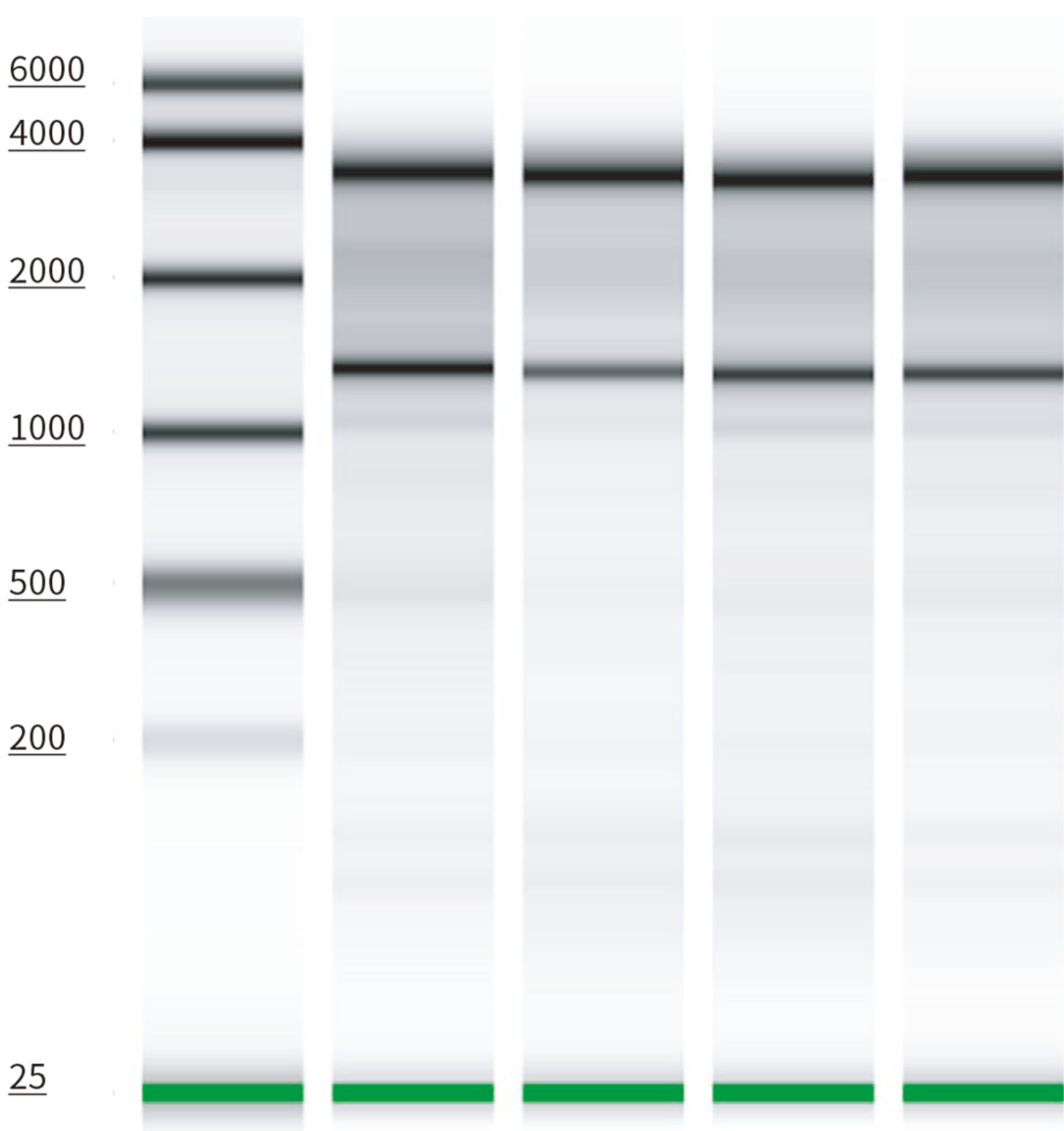


使用血液总RNA提取试剂盒从人全血中提取高质量的RNA全血。血液在室温下存储在EZ Shield®中保存两天并提取（n=4）。

2、出众的得率

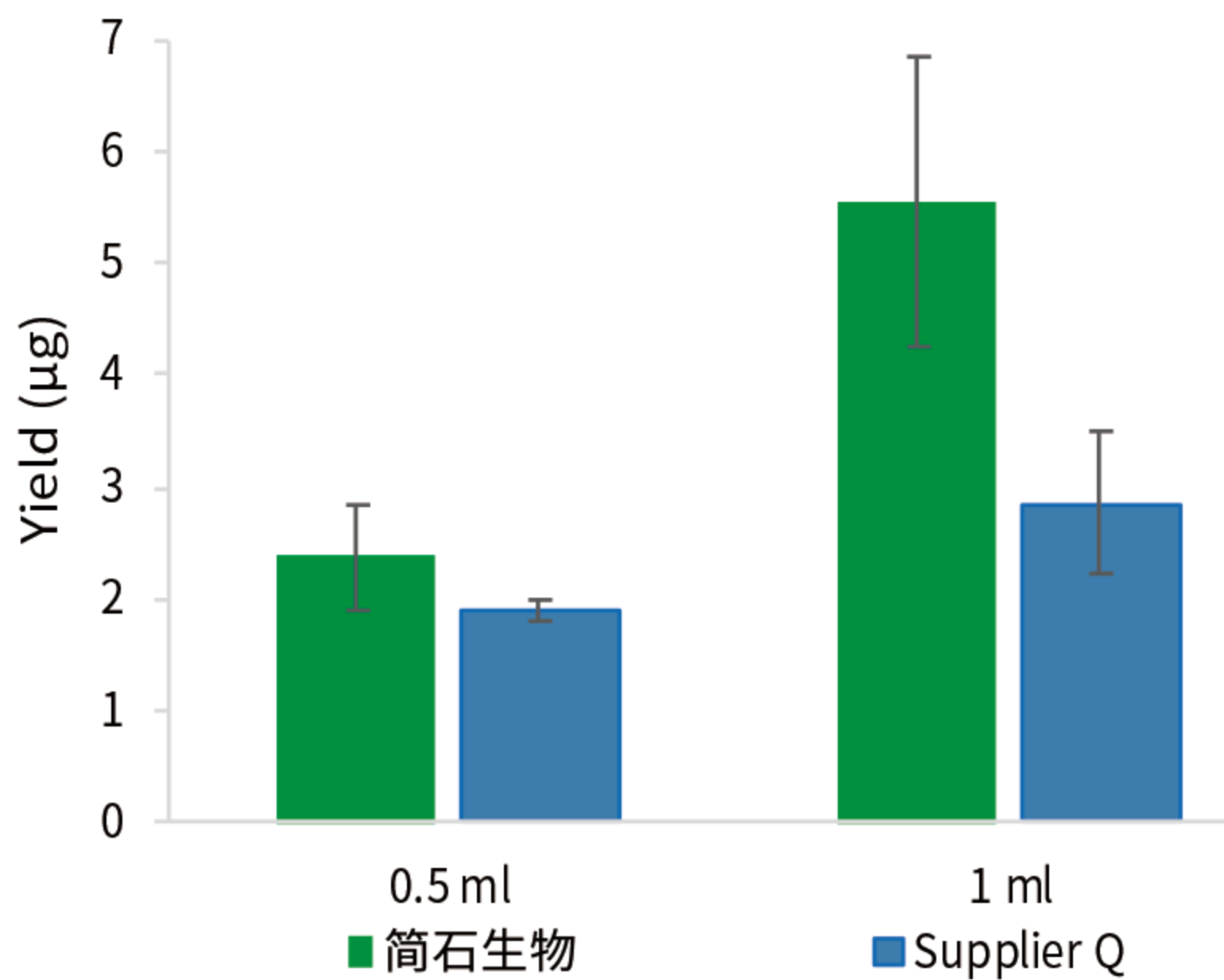

从1毫升人类全血中提取的RNA量使用简石生物-血液总RNA提取试剂盒全血显著高于供应商Q试剂盒（n=3）。

3、保护效果

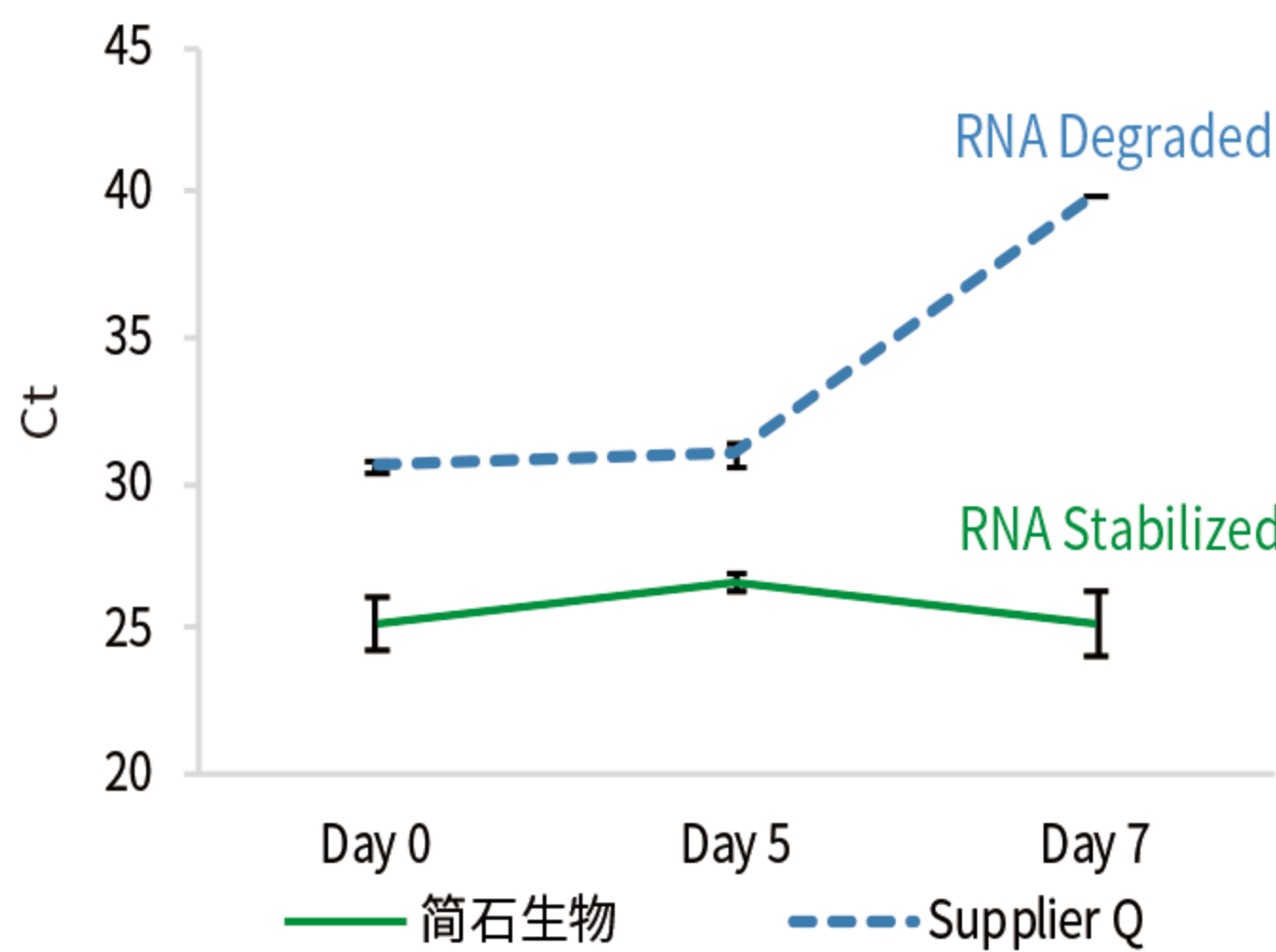

RT-qPCR显示提取过程中可稳定RNA，而供应商Q在提取过程中会导致RNA降解。所有的血液在环境温度下最多可保存7天，并使用简石生物提取试剂盒在指定的时间点提取研究并和供应商Q进行对比。

产品名称	货号	规格
全血RNA提取试剂盒	TR121	50次

官网直通



视频号直通



咨询直通



北京市顺义区马坡镇聚源中路12号院11号楼401



010-58235289



marketing@jianshibio.com



<https://www.jianshibio.com>